



Disponible partout en France, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique

Le siège social de Handicare pour les pays francophones est situé en France à Ballancourt-sur-Essonne avec des partenaires formés et agréés Handicare en régions pour un service de proximité optimal.

Acteur majeur dans le secteur de l'accessibilité à l'échelle mondiale, Handicare est également présent au Royaume-Uni, Etats-Unis, Pays-Bas, Suède, Belgique, Allemagne, Italie, Danemark et Norvège.

Votre partenaire Handicare local



Notez que les couleurs réelles peuvent différer légèrement de celles indiquées. Toutes les informations vous sont fournies de bonne foi mais ne constituent pas une garantie. Handicare se réserve le droit de modifier les designs et les spécifications sans préavis P/N BRO-0004

Handicare 1000 / 1100



PAGE.4

**NOUS SOMMES HEUREUX
DE RESTER À LA MAISON**

“Grâce à notre monte-escalier, nous pouvons vivre de façon indépendante dans la maison que nous aimons”

PAGE.17

**L'ART DE LA
TECHNOLOGIE**

“Une visualisation immédiate de notre futur monte-escalier dans notre maison!”

Index

Handicare : 135 ans d'expérience	6
Présentation du Handicare droit	8
Les avantages du monte-escalier droit	12
Des solutions sur-mesure	17
L'installation – rapide et facile	24
Questions fréquentes	26
Handicare – Qualité certifiée	27
Fiche technique Handicare 1000	28
Fiche technique Handicare 1100	30



“Grâce à notre monte-escalier, nous n'avons pas besoin de déménager pour nous sentir en sécurité chez nous.”



“Nous pouvons rester dans notre propre maison.”



Plus de 135 ans d'expérience



Les avantages du monte-escalier



Notre conseiller Handicare vient de notre région



Une installation rapide

"Nous pouvons rester dans notre propre maison !"

Notre chambre est au premier étage, et depuis quelques semaines, je sentais que les escaliers devenaient de plus en plus difficiles à monter. Après en avoir parlé avec mon mari, nous avons décidé qu'il était temps d'agir. C'est grâce à un de nos amis que nous avons commencé à penser au monte-escalier. Je n'étais pas certaine qu'il y aurait une solution pour des escaliers aussi raides que dans notre maison.



"Grâce au monte-escalier, je reste active et poursuis mes activités quotidiennes en toute sécurité."

Nous avons commencé nos recherches et après avoir contacté un partenaire Handicare agréé local, tout s'est enchaîné très rapidement.

Un conseiller est venu mesurer notre escalier et discuter de nos besoins afin de nous proposer ce qui était le plus adapté pour nous et nous présenter les différentes options envisageables. Quelques jours plus tard, j'étais l'heureuse propriétaire d'un

monte-escalier. Désormais, je peux facilement monter chercher un pull ou mes lunettes sans crainte de tomber.

Nous sommes particulièrement contents car nous avons peur de devoir déplacer la chambre et la salle-de-bain au rez-de-chaussée, voire même de devoir déménager. Et là, nous avons la situation idéale, nous restons chez-nous avec notre beau jardin !

Handicare : plus de 135 ans d'expérience dans le monte-escalier



À ce jour, nous avons plus de 800 000 clients satisfaits partout dans le monde.

Handicare : une histoire d'innovations


Notre entreprise est née en 1886. En 135 ans, beaucoup de choses ont changé, mais une persiste : l'innovation. Partie intégrante de notre ADN, nous sommes depuis le début à l'avant-garde pour rendre nos appareils toujours plus fiables, innovants et faciles à utiliser. Du premier monte-escalier en 1961 à aujourd'hui, nous ne cessons d'innover.

Au-delà même de la sécurité et du confort de l'utilisateur, la conception même du monte-escalier a également connu de grands développements. Désormais, vous pouvez choisir parmi divers styles, revêtements et couleurs de rail.


Chaque maison étant unique, nos monte-escaliers sont fabriqués sur-mesure pour vous. Grâce à des outils innovants, tels que l'application VISION et le PhotoSurvey, notre partenaire Handicare peut mesurer de façon efficace et avec précision votre escalier tout en générant une image 3D du monte-escalier, tel qu'il apparaîtra dans votre intérieur, une fois installé, vous donnant ainsi un aperçu du rendu final.

Avec des bureaux dans le monde entier, y compris au Royaume-Uni, en Italie, Pays-Bas, Allemagne, Etats-Unis, Norvège, Danemark, Suède, Chine et Canada, Handicare est une marque reconnue pour sa qualité, son innovation et son service.

Nos débuts en tant que premier fournisseur d'ascenseurs aux Pays-Bas.

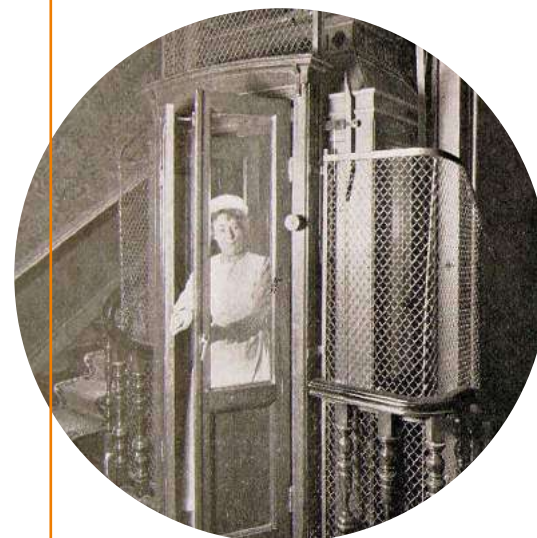

Notre premier monte-escalier est installé.

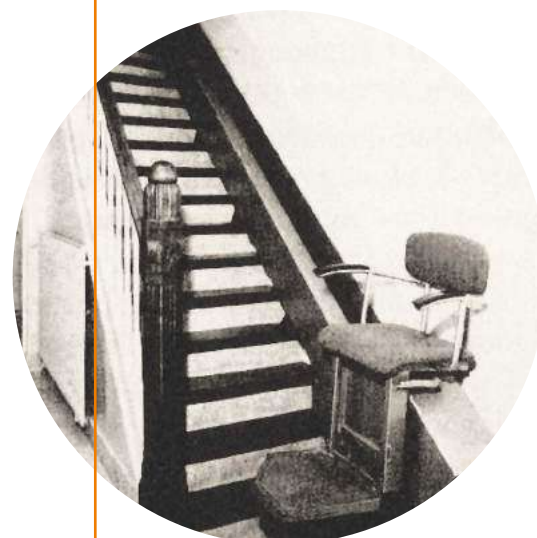

1886

1900

1961

1967

2018

Présent

Nous avons installé l'un des premiers monte-escaliers tournants.



Après seulement 4 ans, nous avons installé plus de 600 ascenseurs.



L'innovation d'Handicare conduit au modèle 1100.



Le monte-escalier Handicare droit

Handicare a une solution pour chaque configuration et chaque escalier.

Tous nos monte-escaliers sont silencieux, sécurisés et faciles à utiliser. Peu importe votre type d'escalier, nos modèles compacts et personnalisés peuvent être installés partout. Même dans les escaliers les plus étroits, il restera de l'espace libre après l'installation de l'appareil.

Continuez à vivre dans votre propre maison, libre de tout risque qui pourrait survenir dans les escaliers. Un monte-escalier offre la liberté de mouvement et la tranquillité d'esprit. Chaque jour, de nombreux clients satisfaits en font l'expérience.



CONFORT

Tous nos monte-escaliers sont équipés d'un siège confortable avec accoudoirs et ceinture de sécurité.



FACILE À UTILISER

Ergonomique, actionnez le joystick pour manoeuvrer le monte-escalier.



PERSONNALISÉ

Chaque rail est fabriqué sur-mesure afin de s'adapter à votre escalier, assurer un ajustement serré et maximiser l'espace pour les autres utilisateurs de l'escaliers.




Le monte-escalier Handicare droit




COMPACT ET PLIABLE

Pliez le monte-escalier lorsqu'il n'est pas utilisé pour économiser de l'espace dans les allées ou les couloirs.

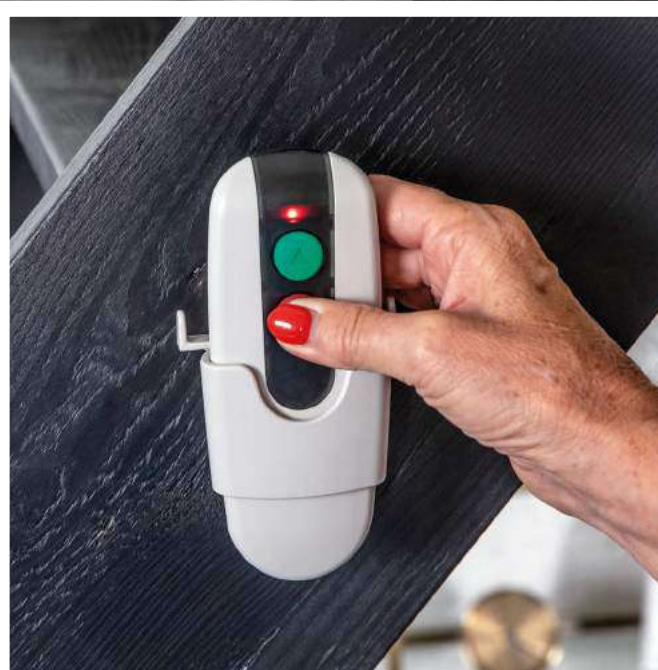

LES TÉLÉCOMMANDES

Deux télécommandes sont incluses pour que vous puissiez appeler votre monte-escalier quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

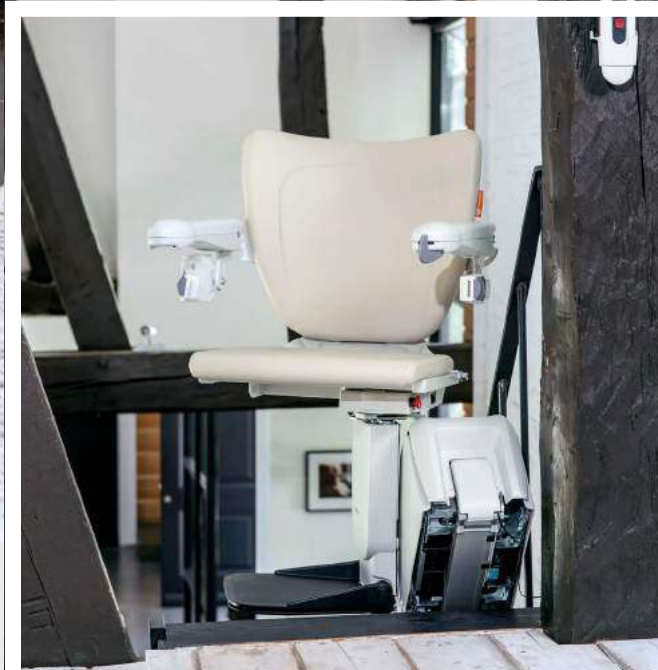

PIVOTEZ VERS LE PALIER

En haut des escaliers, le monte-escalier peut pivoter vers le palier supérieur. Une fois pivoté, vous pouvez descendre du fauteuil en toute sécurité.



ASSEYEZ-VOUS CONFORTABLEMENT

Pour vous asseoir confortablement sur le monte-escalier, le repose-pieds peut être plié et déplié. Cela peut être fait une fois installé sur le monte-escalier.

Les avantages de votre monte-escalier

Avec ses nombreuses fonctionnalités, le monte-escalier droit Handicare sera un atout précieux pour votre maison.



Arrêt de sécurité

Le monte-escalier est équipé de capteurs de sécurité qui permettent d'arrêter l'appareil en cas d'obstacle.

Rail Escamotable

Facile ! Repliez simplement le rail pour dégager la porte. Le rail escamotable est léger et se replie sans effort pour dégager le couloir tandis que le monte-escalier se place en position de stationnement.



Siège pivotant

Faites pivoter votre fauteuil pour descendre sur le palier en toute sécurité et confort. Cela peut être fait de façon automatique ou manuelle.



Rail Coulissant

Une solution unique disponible sur le Handicare 1100. Le rail coulissant est idéal lorsqu'il y a une porte ou un passage à proximité de votre escalier. Il glisse automatiquement et laisse ainsi l'accès libre de tout obstacle.



Scannez le QR code et découvrez le Rail Coulissant en vidéo.



Zéro intrusion

Cette solution inédite est conçue pour les maisons avec une porte en haut des escaliers. Il élimine le dépassement de rail, vous permettant d'installer un monte-escalier Handicare 1100 sans apporter de modifications à votre maison.





Handicare 1000

Avec son rail en aluminium, le Handicare 1000 offre une solution élégante avec une crémaillère cachée. Six coloris de sellerie sont disponibles pour ce modèle qui peut être équipé d'un pivotement automatique et d'un repose-pieds automatique.

Ce rail mince dispose de deux points de stationnement capables de charger les batteries en haut et en bas des escaliers. Le rail peut être équipé d'un rail escamotable pour éviter qu'il n'obstrue le bas de l'escalier.

Handicare 1100

Dernier-né de la gamme des monte-escaliers droits Handicare, le modèle 1100 est particulièrement intéressant pour la finesse et la structure de son rail.

Sans crémaillère, celui-ci est étroit, silencieux et facile d'entretien. Une fois replié, le fauteuil laissera suffisamment d'espace dans les escaliers pour les autres usagers.

Le siège est également fourni de façon standard, avec la fonction de pivotement pour monter et descendre du fauteuil en toute sécurité.



Un rail unique

Sur le marché du monte-escalier, le 1100 tient une place privilégiée en raison de son rail extra fin. Grâce à ses quatre galets d'entraînement et de son système de rail à friction, le modèle Handicare 1100 est silencieux, sans secousse et très pratique à entretenir. Enfin, sa fonction de charge continue vous assure de garder les batteries toujours chargées, quel que soit son point de parking sur le rail.



La plus large gamme
de monte-escaliers disponible

Handicare 1000 pour une utilisation en extérieur



Notre monte-escalier droit extérieur Handicare 1000 est résistant à la plupart des conditions météorologiques. C'est la solution parfaite si vous devez monter des escaliers pour accéder à votre porte d'entrée ou à votre jardin. Cela peut vous donner la liberté de profiter à nouveau du plein air de manière indépendante !




Fiable et facile à utiliser


- Rail fin en aluminium avec une crémaillère cachée et deux points de stationnement / recharge
- Housse étanche de protection pour le siège et le moteur
- Le revêtement du siège couleur ardoise et le tapis du repose pieds sont résistants à l'eau et au soleil
- Les différentes pièces sont traitées pour assurer une protection contre les UV
- Attaches plaquées pour une meilleure résistance à la corrosion
- Version disponible pour une portance maximale jusqu'à 160 kg
- Commande facile à utiliser

Des solutions sur-mesure

Pour mesurer avec précision votre escalier, nous utilisons le PhotoSurvey. Grâce à cet outil de pointe, nous sommes capable de vous montrer une vue en 3D du monte-escalier sur vos escaliers.

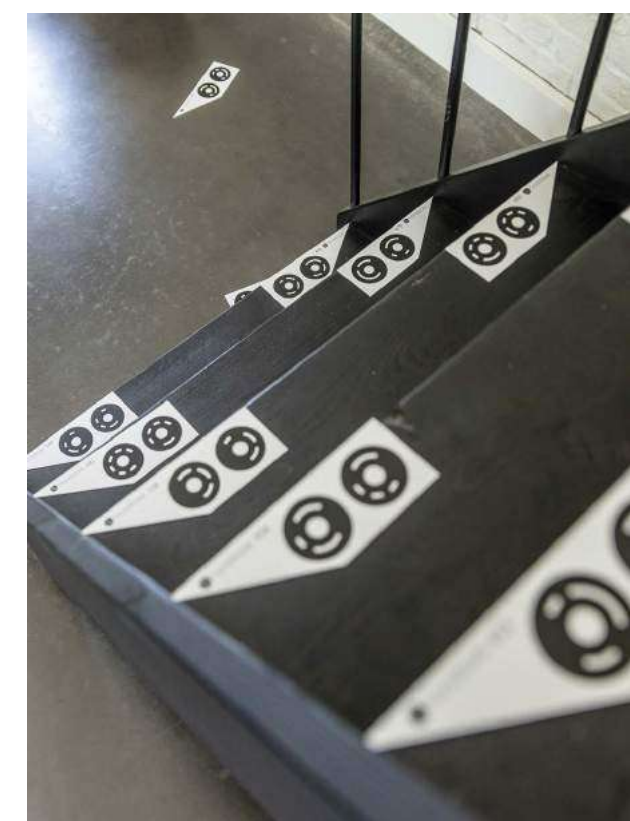

Une fois satisfait de la solution proposée, la production de votre monte-escalier peut commencer dans l'une de nos usines en Hollande ou au Royaume-Uni. Chez Handicare nous sommes fiers, de concevoir, développer et fabriquer nos solutions de monte-escaliers.

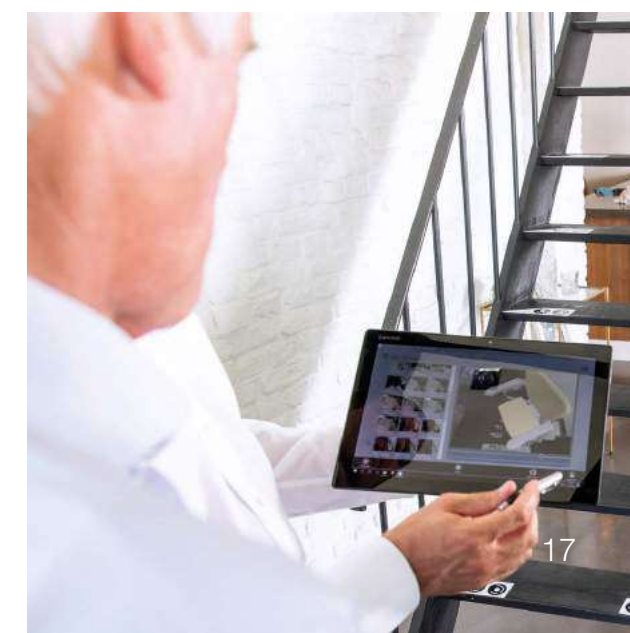

Un monte-escalier pour chaque intérieur

Bien sûr, il est important que votre monte-escalier s'intègre au reste de votre décoration. C'est pourquoi, nous vous offrons la possibilité de choisir parmi trois styles de siège, avec différents types de revêtement.

Siège Style (HANDICARE 1100)



Siège Smart XXL (HANDICARE 1000)

Avec une capacité de 160 kg et 200 kg, les Handicare 1000 XL et XXL sont nos modèles les plus puissants.

Siège Smart (HANDICARE 1000)

Siège Smart Perche (HANDICARE 1000)

Si vous avez des escaliers étroits, ou si vous avez des difficultés avec vos genoux ou vos articulations de la hanche, et que cela vous empêche de vous asseoir, un fauteuil Smart Perche pourrait être la solution idéale pour vous. Il vous permet en effet de monter en position presque verticale. La chaise est plus courte, ce qui fournit une zone de support stable pour s'accroupir.

Siège extérieur (HANDICARE 1000)

Coloris disponibles (HANDICARE 1000)



Comment utiliser le monte-escalier



Scannez le QR code
et découvrez en vidéo
comment utiliser
le Handicare 1100



Scannez le QR code
et découvrez en vidéo
comment utiliser
le Handicare 1000



ÉTAPE 1

Asseyez-vous sur votre monte-escalier.



ÉTAPE 4

Lorsque vous arrivez à l'étage,
maintenez le joystick pour
pivoter vers le palier et faciliter
votre passage du monte-escalier
au palier.



ÉTAPE 2

Attachez la ceinture de sécurité et
appuyez sur le bouton pour déplier le
repose-pieds et y placer vos pieds.
Ou déployez-le de façon manuelle.




ÉTAPE 5

Enfin, décrochez votre ceinture
de sécurité et descendez du
monte-escalier.



ÉTAPE 3

Lorsque vous êtes à l'aise et en
sécurité, actionnez le joystick
pour faire fonctionner le monte-escalier.

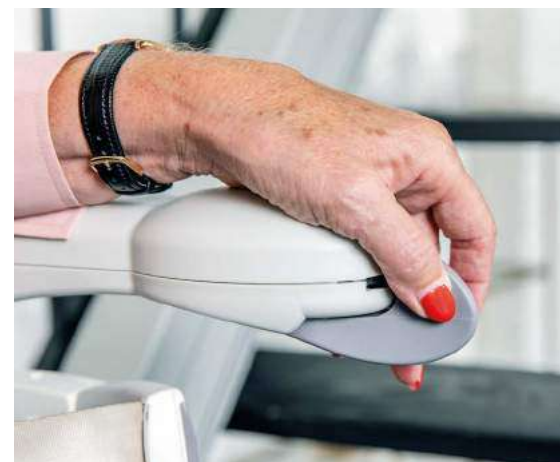

*“Si facile, je peux
continuer d'utiliser
les escaliers en
toute sécurité”*





“Nous avons choisi un partenaire agréé Handicare régional”

Depuis quelque temps, mon épouse avait des difficultés à monter les escaliers. Au début, elle était un peu réticente à l'admettre, mais après plusieurs incidents, nous en avons discuté et nous avons décidé d'agir et de rechercher les solutions qui s'offraient à nous ; nous devons résoudre ce problème avant que cela ne devienne trop dangereux. Nous avons commencé nos recherches sur Internet, où nous avons pu comparer les différentes offres disponibles sur le marché.

Avec ses 135 ans d'expérience et sa large gamme de produits, Handicare s'est démarqué et nous avons sélectionné un partenaire agréé Handicare proche de chez nous. Un conseiller expérimenté est venu chez nous pour évaluer la situation et mesurer l'escalier, après quoi il a pu nous conseiller la meilleure solution pour nous. Quelques jours plus tard, notre monte-escalier était installé !



Scannez le QR code
et découvrez la vidéo



“C'est réconfortant de savoir que l'on peut compter sur un partenaire certifié Handicare à côté de chez nous pour l'entretien ou un dépannage si jamais nous en avons besoin. C'est aussi un soulagement pour nos enfants qui n'habitent pas à proximité.”





L'installation

En choisissant Handicare, vous choisissez un groupe qui s'occupe de votre monte-escalier, de sa conception à son installation. Cela nous permet de préparer de manière optimale votre appareil, avant qu'il n'arrive chez vous et soit installé par un technicien certifié Handicare.



1

Prenez rendez-vous et un technicien qualifié viendra installer votre monte-escalier.

2

En quelques heures seulement, le monte-escalier sera installé.



3

C'est seulement après s'être assuré que tout est en ordre et que vous vous sentez à l'aise avec votre appareil, que le technicien prendra congé.

FAQ : Questions fréquentes

Le projet d'un monte-escalier et son installation soulèvent de nombreuses questions. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter directement au 01 60 79 99 20 ou rendez-vous sur notre site internet www.handicare-monte-escaliers.fr. Sinon, voici quelques-unes des questions qui nous sont le plus souvent posées.

DES TRAVAUX SONT-ILS NÉCESSAIRES AVANT L'INSTALLATION D'UN MONTE-ESCALIER ?

Non ! Un monte-escalier Handicare peut être installé en quelques heures seulement. Et comme le rail est fixé directement sur les marches, nous ne toucherons pas aux murs. Par contre, si vous avez le projet de changer le papier peint ou repeindre le mur, pour des questions pratiques, mieux vaut le faire avant !

EST-CE QUE JE PEUX BÉNÉFICIER D'AIDES FINANCIÈRES POUR L'ACHAT DU MONTE-ESCALIER HANDICARE DROIT ?

Bien sûr ! Il existe différentes aides pour vous permettre de financer votre monte-escalier. Vous pouvez notamment bénéficier d'aides de la part des organismes d'aides au financement, une réduction de la TVA ou encore un crédit d'impôt de 25%.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE PANNE D'ÉLECTRICITÉ ?

Si une panne de courant survient, ne vous inquiétez pas. Votre monte-escalier Handicare dispose de batteries pour rester opérationnel et effectuer au moins 10 A/R.

EST-CE QUE LE MONTE-ESCALIER HANDICARE DROIT S'INTÈGRERA BIEN AVEC MA DÉCORATION ?

Nous ferons de notre mieux pour trouver la correspondance parfaite entre le monte-escalier et votre décoration. Handicarevous offre le choix entre un certain nombre de couleurs de siège et de revêtements qui ont été sélectionnés en collaboration avec des designers pour correspondre au mieux aux dernières tendances en matière d'intérieur.

QUEL EST LE PRIX D'UN MONTE-ESCALIER HANDICARE DROIT ?

Chaque monte-escalier étant fabriqué sur-mesure et adapté à votre escalier, vos souhaits et vos besoins, les prix peuvent varier. Cependant, vous pouvez disposer de nombreuses aides et notamment du crédit d'impôt pour vous permettre de le financer en partie. Pour une consultation gratuite à domicile, contactez-nous au 01 60 79 99 20.

Qualité certifiée !



Tous nos produits sont livrés avec une garantie « constructeur » et sont élaborés dans le strict respect des normes en vigueur. Afin de vous offrir une qualité et une sécurité optimale et comme l'exige la législation, nos certifications et nos labels sont revalidés chaque année par des services d'inspection indépendants, tels que TNO et Liftinstituut.




Cette démarche de transparence vous assure une sérénité totale et la certitude que votre projet est entre les mains de vrais professionnels. En France, Handicare est partenaire de la Silver Économie.





Handicare 1000 (XL + XXL)

Monte-escaliers droits

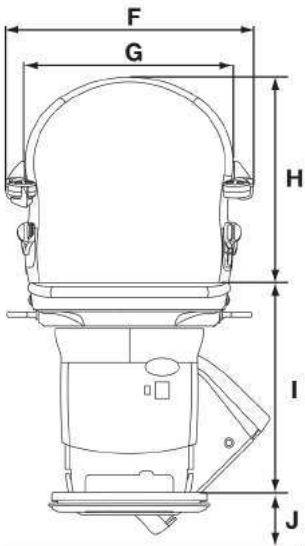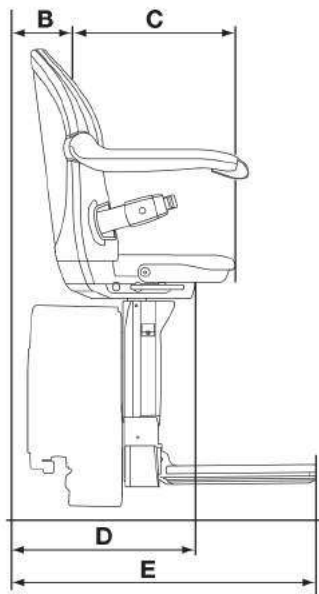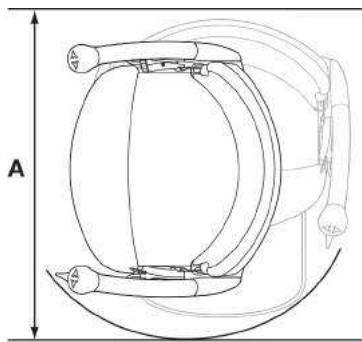

Siège Smart		Dimensions
A	Rayon de pivotement minimal	670mm
	Avec élargisseurs d'accoudoirs	695mm
	Avec élargisseurs d'accoudoirs XL	710mm
B	Distance minimale entre mur et côté intérieur du dossier*	75mm
C	Profondeur de siège	360mm
	Avec siège large	425mm
D	Largeur minimale du repose-pied plié*	385mm
E	Largeur minimale du repose-pied ouvert*	650mm
F	Largeur extérieure des accoudoirs	550mm
	Avec élargisseurs d'accoudoirs	590mm
	Avec élargisseurs d'accoudoirs XL	635mm
G	Largeur intérieure des accoudoirs	465mm
	Avec élargisseurs d'accoudoirs	520mm
	Avec élargisseurs d'accoudoirs XL	565mm
H	Hauteur du dossier	455mm
I	Hauteur du repose-pied au siège	
	Option de siège standard	465-540mm
	Option "siège perche"***	675-875mm
J	Hauteur minimale du repose-pied	70mm
Intrusion minimale du rail dans l'escalier		115mm
Limite maximale du poids - Version standard		137kg
Version charge lourde (XL)***		160kg
Version charge extra lourde (XXL)***		200kg
Vitesse		0.07m/sec
Angle d'escalier maximum		27 - 56°

* +45 mm pour charge extra lourde (XXL) avec pivotement dans les deux sens et élargisseurs d'accoudoirs XL
** Pas disponible pour charge extra lourde (XXL)
*** Pas disponible avec un rail escamotable




Certaines dimensions ci-dessus dépendent des escaliers dans le logement.
Pour plus d'informations sur ces dimensions et les caractéristiques de ce siège, consultez le manuel de vente. Handicare se réserve le droit de modifier les designs et toutes autres spécificités sans préavis.

T : UK/USA > 0031 72 75 11116
GER > 0031 72 75 11117
FRA > 0031 72 75 11118
ROW > 0031 72 75 11119
F : 0031 72 57 68 877
E: data@handicare.com



Handicare 1100

Monte-escaliers droits

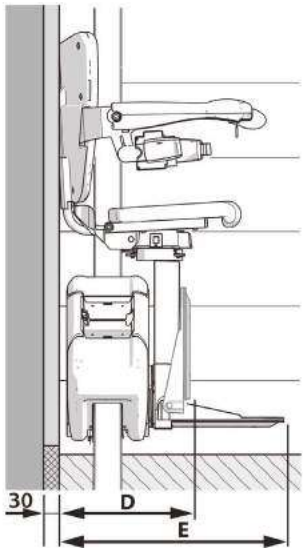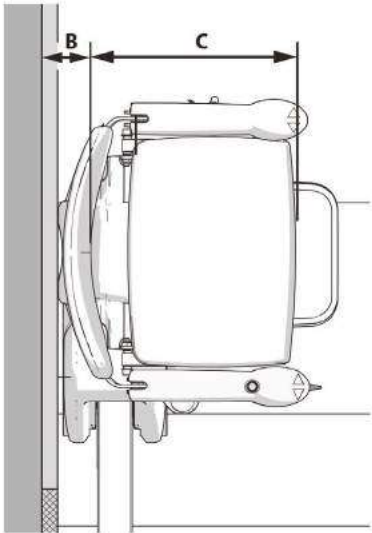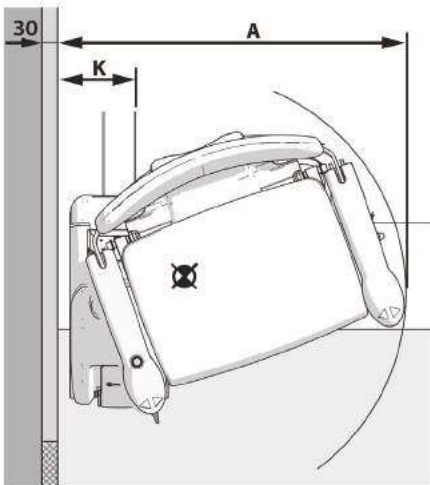

Siège 1100 Style		Dimensions
A	Rayon de pivotement	645mm
B	Distance minimale jusqu'au dossier	60mm
C	Profondeur du siège	390mm
D	Largeur minimale plié au repose-pieds	320mm
E	Largeur minimale ouvert au bord du repose-pieds	530mm
F	Largeur à l'extérieur des accoudoirs	575mm
G	Largeur à l'intérieur des accoudoirs	450mm
H	Hauteur du dossier	400mm
I	Hauteur du repose-pieds au siège	430 - 520mm
J	Hauteur minimale du repose-pieds	70mm
K	Avant du rail	160mm
Limite maximale du poids		30-45° - 140kg 46-50° - 130kg
Vitesse		0.15m/sec
Angle d'escalier maximum		30-50°

Certaines dimensions ci-dessus dépendent des escaliers dans le logement. Pour plus d'informations sur ces dimensions et les caractéristiques de ce siège, consultez le manuel de vente. Handicare se réserve le droit de modifier les designs et toutes autres spécificités sans préavis.

